

M·A·Y·A·

ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ



- Děkujeme vám, že jste si koupili ultrazvukový přístroj MAYA.
- Před použitím přístroje si pozorně přečtete tento návod k obsluze a uschovejte ho na bezpečné místo pro budoucí referenční účely.
- Tento výrobek je určen k péči o normální pleť a ke kosmetickému vylepšování pleti. Výrobce nepodporuje žádný jiný způsob použití a prodej v souvislosti s lékařskými účely.



【 Záruční list 】

Model výrobku

Datum koupě

Místo koupě

Prodejní oddělení

• Dvouletá záruka

1. V nepravděpodobném případě, že se během prvních dvou let od data koupě objeví závada na výrobku:
2. Vraťte výrobek společně s účtenkou a původním záručním listem a my vám ho bezplatně opravíme za předpokladu, že byl provozován podle návodu k obsluze.
Záruka se nevztahuje na:
 - 1) poruchy nebo škody způsobené nedodržováním pokynů v návodu k obsluze;
 - 2) nesprávné nebo neoprávněné opravy;
 - 3) neúmyslné škody způsobené během přepravy, upuštění na podlahu, úmyslné poškození nebo zanedbání péče o výrobek po zakoupení;
 - 4) škody vzniklé v důsledku požáru, zemětřesení, zátopy, blesku nebo silného větru.
3. Ušchevejte tento záruční list na bezpečné místo, protože kopie se nevydávají.

Obsah

Princip činnosti ultrazvukového přístroje MAYA	1
Bezpečnostní pokyny	1~2
Přehled součástí	3
Pracovní postupy	
• Jak ošetřovat obličej	4
• Základní způsob péče o obličej	4~5
• Speciální způsoby péče o obličej	6~7
• Ošetřování těla	8
• Způsoby péče o tělo	8~11
Po použití	11
Otázky a odpovědi	12~13
Záruka	

Specifikace

Název: Ultrazvukový přístroj MAYA na péči o pleť

Frekvence ultrazvuk: 1 MHz

Napájení: 15 V ss., 0,35 A

Proud: 230 mA

Rozměry: 7 cm x 3,8 cm x 4,3 cm

Hmotnost: 190 g

Princip činnosti ultrazvukového přístroje MAYA

Ultrazvuk s frekvencí vyšší než 20 000 Hz je pro lidské ucho neslyšitelný. Nachází široké využití v léčebných postupech. Již řadu let využíváme ultrazvukovou technologii v péči o pleť. Ultrazvukový přístroj MAYA se stal jedním z nejčastěji používaných zařízení ve většině kosmetických salónů.

Účinky ultrazvuku na lidskou kůži:

1. Mechanické působení
2. Ohřev a fyzikálně-chemické působení

Ultrazvuk dokáže vyvolávat změny v objemu a pohybu buněk lidského těla. Tento účinek je znám jako masáž buněk. Stimuluje a vyrovnává buněčné membrány. Zlepšuje celkovou funkčnost pokožky a zvyšuje podkožní teplotu o 0,5 až 1 °C. Tím zvyšuje absorbování živin skrz kůži, zrychluje metabolismus a regeneruje kožní tkáň.

Ultrazvuk také dokáže rozkládat nadbytečný okolní tuk, spotřebovávat energii a obnovovat poškozené lymfatické a kapilární cévy, takže vám může pomoci zhubnout a zformovat postavu

Jedinečný a vysoce kvalitní ultrazvukový přístroj MAYA

Tato nová generace ultrazvukového přístroje MAYA byla navržena a vyvinuta odborníky na elektroniku z Postgraduálního institutu univerzity v Tsinghua a techniky ze společnosti Shenzhen Goodwind Technology Development Co., Ltd. na základě rozsáhlého mezinárodního výzkumu a rozboru účinků ultrazvukové technologie jak ve zdravotnictví, tak v oboru profesionální péče o pleť. Přístroj vytváří ultrazvuk o frekvenci 1 MHz s rovnoměrným vlnovým průběhem, který dokáže proniknout kůží do hloubky 0,5 až 3 cm. Vyvinuli jsme tři speciální programy (s vysokým, středním a nízkým výkonem) pro různé části těla. Pokud použijete ultrazvukový přístroj MAYA na péči o pleť se speciálně navrženým výrobkem na různých částech těla, můžete dosáhnout dokonalých výsledků ve zlepšování vzhledu pleti, odbourávání nadměrného tuku a formování postavy.

Bezpečnostní pokyny

- Tento přístroj je určen pouze k péči o pleť a ke kosmetickému vylepšování kůže. Nepoužívejte ho k žádným jiným účelům.
- Řiďte se tímto návodem k obsluze a dodržujte četnost používání. Při prvním případě neb v případě velmi citlivé pleti zkrat'te dobu působení.
- Pokud se setkáte s čímkoliv neobvyklým, ukončete práci. Ihned se porad'te s lékařem.

Nepoužívejte tento spotřebič:

- v těhotenství;
- na uších, očních bulvách, v okolí strumy (štítné žlázy), přímo na některých kloubech například na loktech nebo na kolenou apod.;
- na sluncem spálené nebo zanícené kůži;
- máte-li dermatitidu nebo jakoukoliv kožní alergii způsobenou kosmetickými přípravky;
- na místech s vyrážkou, bradavicemi nebo záněty;
- na skvrnách, které způsobují svrbění nebo zarudnutí kůže;
- na částech těla, které byly podrobeny zákroku plastické chirurgie;
- na místech, z nichž bylo kosmeticky odstraněno ochlupení krémem nebo holicím strojkem;
- na částech těla nebo kůže, které nebyly uvedeny v tomto návodu k obsluze.




Bezpečnostní opatření pro obsluhu a údržbu:

- nepoužívejte tento spotřebič, pokud zaznamenáte přehřívání, poškození nebo povolení kabelů, zástrčky a zásuvky.
 - nepokládejte ho na žádné mokré povrchy nebo do blízkosti vody.
 - máte-li mokré ruce, nepracujte se spotřebičem, ani se ho nedotýkejte.
 - před uskladněním vypněte spotřebič a odpojte ho od sítě.
 - chraňte spotřebič před dětmi.
 - děti nesmí pracovat s tímto spotřebičem.
- * před prvním použitím proveďte zkoušku alergie.





Jednoduchá zkouška alergie:

1. Očistěte si předloktí
2. Naneste na očistěné místo speciální výrobek a nechte ho uschnout na vzduchu (během zkoušky se nedotýkejte vody, ani neomývejte výrobek). Pokud zaznamenáte alergickou reakci nebo neobvyklou reakci kůže, ihned ukončete zkoušku a okamžitě navštivte lékaře nebo nejbližší nemocnici.
3. Pokud se po 48 hodinách neobjeví známky alergické reakce nebo neobvyklé reakce kůže, můžete pravidelně používat tento speciální výrobek a přístroj.

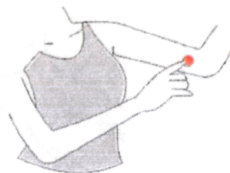


Přehled součástí

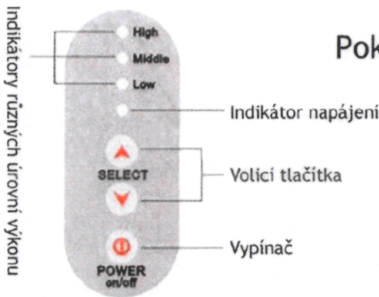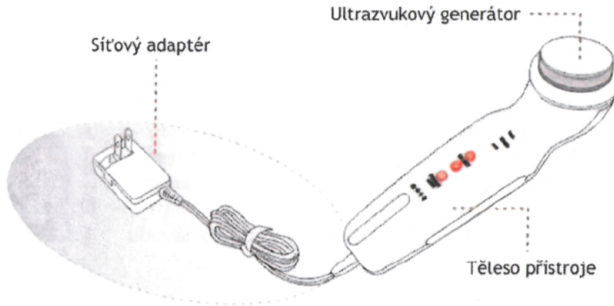

Pokyny k ovládacímu panelu:

- Po zapnutí přístroje nevznikají žádné ultrazvukové vlny a nespouští se časovač.
- Ultrazvukové vlny se začnou vytvářet a časovač se spouští pouze v případě, že svítí indikátor vysokého, středního nebo nízkého výkonu.

Postup práce a zkuška funkčnosti:

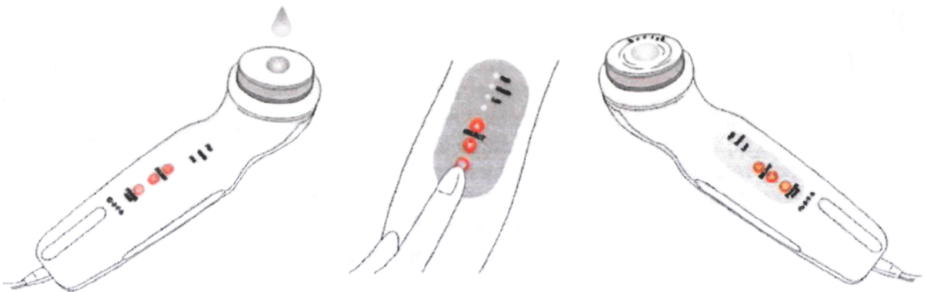

▲ Připojte síťový adaptér, položte spotřebič na rovný povrch a umístěte na ultrazvukový generátor několik kapek vody.

▲ Zapněte napájení a potom vyberte jednu z úrovní výkonu: vysokou, střední nebo nízkou.

▲ Pokud voda na ultrazvukovém generátoru vibruje, znamená to, že se vytvářejí ultrazvukové vlny.

Jak ošetřovat obličej (zvolte nízký výkon)

1. Nejprve důkladně odstraňte make-up a nečistoty. Ošetřování ultrazvukem se musí provádět na vyčištěné kůži.
2. Připojte k přístroji síťový adaptér. Zapněte napájení a rozsvítí se indikátor.




3. Naneste na obličej vhodné množství vodivého výrobku. Ujistěte se, že ošetřovaná plocha je důkladně pokrytá vodivým výrobkem.
4. Naneste vhodné množství vodivého výrobku na ultrazvukový generátor.




5. Stisknutím voliče intenzity zvolte nízký výkon. Jakmile přístroj začne vytvářet ultrazvukové vlny, spustí se časovač. Po deseti minutách se přístroj automaticky vypne.

Doporučení: Pro přenos ultrazvukových vln byste měli používat určený vodivý výrobek.

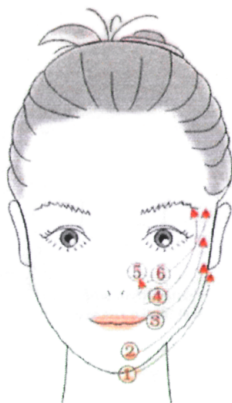


Základní způsob péče o obličej:


1. Krok 1 vyžaduje osm minut. Vyrovnanými pohyby masírujte kůži ultrazvukovým generátorem. Masáž musí trvat čtyři minuty. Nejprve čtyři minuty ošetřujte ultrazvukovým generátorem pravou stranu obličeje (říd'te se časovačem na svých hodinkách). Potom čtyři minuty ošetřujte levou stranu obličeje. Ovládejte přístroj v pořadí znázorněném na obrázku a postupujte nahoru (asi třikrát).

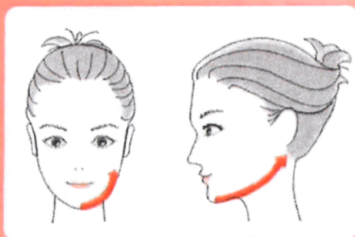


1. Postupujte vyznačeným směrem od čelisti k ušním lalůčku.

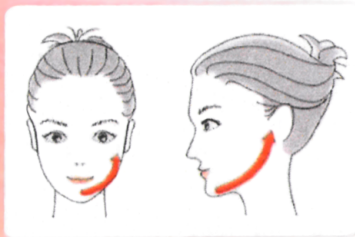


2. Postupujte vyznačeným směrem od čelisti k části před uchem.

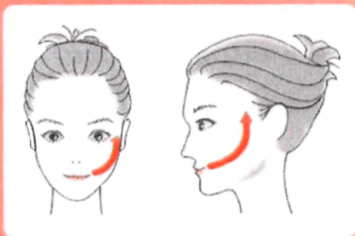


3. Postupujte vyznačeným směrem od koutku úst k horní části ucha.

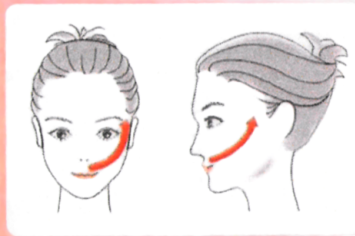

4. Postupujte vyznačeným směrem od části pod nosem k části pod očím.

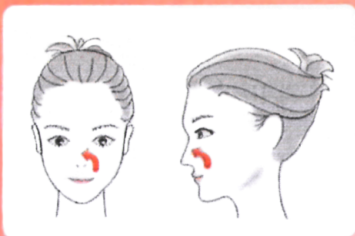

5. Postupujte vyznačeným směrem po obou stranách nosu.

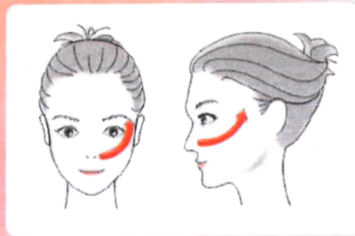


6. Postupujte vyznačeným směrem od nosu k části blízko spánku.

Speciální způsoby péče o obličej

(Délka působení: dvě minuty)

Zemská přitažlivost, přibývající věk a tloušťnutí - všechny tyto faktory mají za následek ochabování, uvolňování kůže a vznik podbradku. Následující úkony se provádějí 30 sekund až jednu minutu na každém místě. Mírně tlačte na ultrazvukový generátor, abyste napnuli kůži a svaly, a postupujte ve směru šipek znázorněných na obrázku. Po základní péči o kůži můžete nyní přistoupit ke speciálním způsobům.

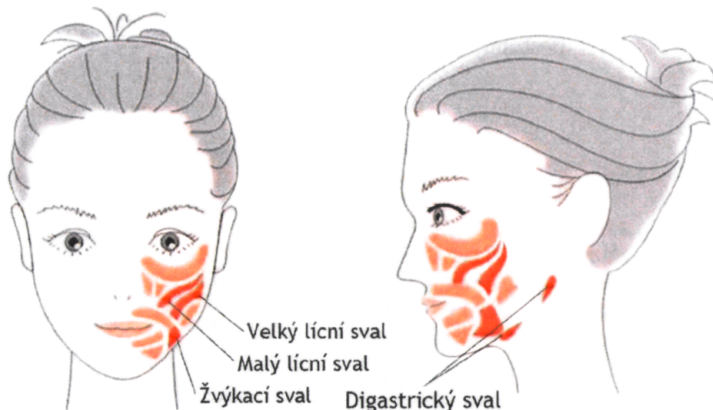

Na obrázku výše jsou znázorněny svaly v obličeji.

- Lepších výsledků dosáhnete tak, že budete pohybovat ultrazvukovým generátorem souběžně se strukturou svalů.

Napínání obličeje

Vytahování konce úst



- Postupujte od koutků úst k částí blízko očí.



- Postupujte od koutků úst nahoru.

Napínání podbradku



- Ved'te tahy od brady ke spodní části uší a od brady ke koutkům úst. A vždy postupujte zdola nahoru.

Péče o kořen nosu



- Jednu až dvě minuty přejíždějte po nose nahoru a dolů.

Ekzémy a akné

- Místa s ekzémy, skvrnami, akné, spáleninami od slunce apod. neošetřujte přímo. Můžete však ošetřit okolní kůži, abyste podpořili přirozené hojení kožního onemocnění.



Doporučená péče o kůži



Nepoužívat na oční bulvy a v okolí strupy (štítné žlázy)



Pokud generátor přestane klouzat po kůži, přidejte trochu vodivého výrobku.



Kontakt boční strany generátoru
Boční strana generátoru se musí lehce dotýkat kůže.



Pohyb boční strany generátoru

1. Pět sekund pohybu od brady za uší
2. Geometrické pohyby zdola nahoru a zleva doprava

Způsoby péče o části těla

Každou jednotlivou část těla ošetřuje maximálně deset minut, avšak maximálně dvakrát denně a maximálně třikrát týdně.

- 1) Důkladně se umyjte mýdlem a vodou, abyste odstranili všechny nečistoty.
- 2) Před léčbou naneste na příslušnou část těla vhodné množství vodivého výrobku
- 3) Potřete ultrazvukový generátor vhodným množstvím vodivého výrobku.
- 4) Stiskněte tlačítko vypínače a rozsvítí se indikátor napájení.
- 5) Zvolte úroveň výkonu (při ošetřování paží a lýtek zvolte střední výkon a při ošetřování pasu, břicha, hýždí a stehen zvolte vysoký výkon).
- 6) Lehce přiložte ultrazvukový generátor na tělo a mírně ho přitiskněte. Ujistěte se, že mezi tělem a generátorem není žádná mezera.
- 7) Každých deset minut se ozve zvukový signál a přístroj se automaticky vypne. Potom můžete stisknout tlačítko vypínače a začít na jiné části těla. Pokud chcete zastavit přístroj dříve, přepněte vypínač do vypnuté polohy.
- 8) Po skončení ošetření otřete veškeré vodivé výrobky vlhkou utěrkou. Také ho můžete smýt teplou vodou. K čištění ultrazvukového generátoru použijte dezinfekční přípravek určený k dezinfekci přístrojů.



Nepoužívejte tento přístroj přímo na středu hrdla, na očních víčkách a na některých kloubech, například na loktech, kolenou apod.

Ošetřování těla


Upozorňujeme, že toto jsou pouze všeobecné pracovní metody. Jakékoliv náročnější a profesionální pracovní metody konzultujte s poradcem z oboru péče o kůži.

Ošetřování paží

Přístroj napíná uvolněné svaly a rovněž odbourává tuk v pažích.
Intenzita: Zvolte střední výkon

Postup:

1. Pohybuje ultrazvukovým generátorem souvislými kruhovými pohyby od spodní k horní části paže.
2. Nebo se řiďte směrem znázorněným na obrázku.
3. Vyhněte se přímému kontaktu s loktem.

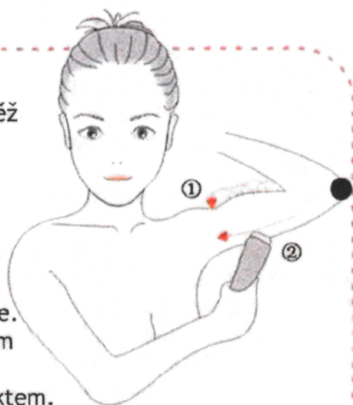

Ošetření pasu a břicha

*** Nepoužívejte tento přístroj v těhotenství.**

Funkce: Snížení hmotnosti a obnovení správného tvaru

Intenzita: Zvolte vysoký výkon


Délka: Toto ošetření trvá 8 - 10 minut

Pas:

1. Pohybuje ultrazvukovým generátorem nahoru a dolů souběžně se strukturou svalů v pase.
2. Pohybuje ultrazvukovým generátorem ze stran ke středu pasu.

Břicho:

- 1) Přejíždějte ultrazvukovým generátorem kruhovými pohyby kolem pupku, jak je znázorněno na obrázku (3).
- 2) Pohybuje ultrazvukovým generátorem ve velkých kruzích po břichu, jak je znázorněno na obrázku (4).

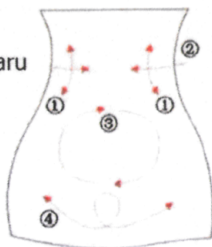


Lýtka

Funkce: Snížení hmotnosti a obnovení správného tvaru

Krok 1: Pohybujte ultrazvukovým generátorem v kruzích od spodní k horní části lýtka.

Krok 2: Pohybujte ultrazvukovým generátorem rovně od spodní k horní části lýtka (směr 2).

Poznámka: Neošetřujte přímo kolena (vyhýbejte se kloubům).

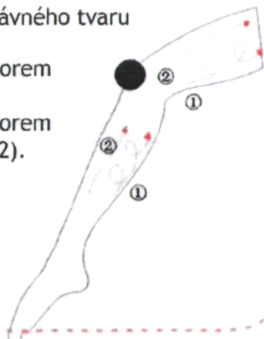


Napínání a stahování hýždí

Funkce: Jak víte, hýžd'ové svaly se mohou uvolnit a ztratit tvar. Toto ošetření může zpevnit hýžd'ové svaly a zlepšit tvar hýždí.

Intenzita: Zvolte vysoký výkon

Délka působení: 10 minut

Postup: Pohybujte ultrazvukovým generátorem shora nahoru a ze stran ke středu hýždí, jak je znázorněno na obrázku.

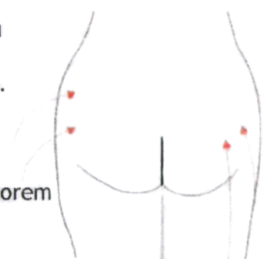

Další speciální ošetření

Intenzita: Zvolte střední výkon

Délka působení: Toto ošetření trvá minimálně jednu minutu na každou nohu. Při ošetřování chodidel postupujte podle obrázku.

Toto ošetření může zlepšit mízní oběh, proto pomáhá při léčení otoků.



Ošetřování předloktí a rukou

Intenzita: Zvolte nízký výkon


Délka působení: Ošetření jednoho předloktí a jedné ruky trvá 5 minut

Krok 1: Postupujte podle obrázku (1).

Krok 2: Postupujte podle obrázku (2).

Krok 3: Postupujte podle obrázku (3).

Pohybujte ultrazvukovým generátorem od špiček prstů k předloktí.

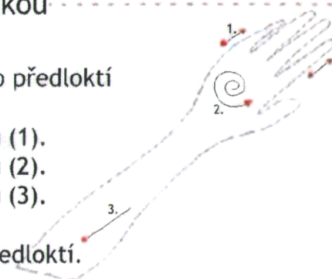

Bezpečnostní upozornění

- Pokud zaznamenáte přehřívání ultrazvukového generátoru, ihned vypněte přístroj.
- Ujistěte se, že ultrazvukový generátor souvisle klouže. Nezastavujte pohyb na jednom místě.
- Nepoužívejte tento přístroj na kůži, pokud není důkladně navlhčená speciálně navrženým výrobkem pro péči o kůži. (Je nutné použít speciálně navržené vodivé výrobky)

Po použití

Zastavte generování ultrazvuku, stisknutím vypínače vypněte přístroj. ▶

Odpojte napájení. ▶



Odstraňte výrobek z generátoru. ▶



K čištění ultrazvukového generátoru použijte dezinfekční přípravek určený k dezinfekci přístrojů.



Zbytky výrobku na kůži očistěte vodou. ▶

Otázky a odpovědi

Jaký je rozdíl mezi ultrazvukovým přístrojem a ionizačním přístrojem? Který z nich si mám vybrat?

Ačkoliv oba přístroje slouží k péči o pleť, liší se použitím.

Účel ultrazvukového přístroje

Ultrazvukový přístroj dokáže generovat ultrazvukové vlny miliónkrát za sekundu. Tyto vlny mohou procházet kožními vrstvami, masírovat svalovou vrstvu, zvyšovat teplotu spodní vrstvy kůže o 0,5 až 1 °C a zlepšovat oběh tekutin. Také zlepšují elasticnost svalů, odstraňují tuk, napínají kůži a přispívají k hubnutí.

Účel ionizačního přístroje

Funkce tohoto přístroje vychází z elektrických vlastností. Elektrické náboje se stejnou polaritou se odpuzují a elektrické náboje s rozdílnou polaritou se přitahují. Přístroj rovněž dokáže dočasně oslabit přirozenou ochrannou funkci kůže, takže může zavést ionizační výtažek do nižších vrstev kůže, kde se mohou účinně vstřebávat živiny. Tím se urychluje regenerace kožních buněk, zlepšuje se metabolismus, zlepšuje se vzhled pleti, zesvětluje se barva, udržuje se obsah vlhkosti a předchází se vzniku vrásek.

Který přístroj si má zákazník vybrat?

Pokud chcete zlepšit kůži, aby byla zdravější, jemnější, mladší a světlejší, měli byste zvolit ionizační přístroj a příslušný ionizační výtažek. Stárnutí kůže s rostoucím věkem je do jisté míry způsobeno ztrátou elasticnosti. Ačkoliv ionizační přístroj vytváří proud, který má jistý masážní účinek, působí pouze na povrchu kůže. Chcete-li zpevnit svaly a odstranit nadbytečný tuk, měli byste zvolit ultrazvukový přístroj.

Kolikrát mohu použít tento ultrazvukový přístroj?

Přístrojem můžete ošetřovat jednu část těla maximálně deset minut denně a ne častěji než třikrát týdně. Jinak dojde k nadměrné stimulaci kůže a může se stát, že nedosáhnete požadovaných výsledků.

Je pravda, že ultrazvukový přístroj dělá zázraky ve zlepšování vzhledu pleti, zesvětlování kůže, odstraňování vrásek a hubnutí?

Hlavním účelem ultrazvukového přístroje na péči o pleť je přenášet ultrazvukové vlny, zavádět speciální výtažek do nižších vrstev kůže, masírovat buňky, zlepšovat oběh krve a mízy a zlepšovat metabolismus. Pokud zvolíte vhodný výtažek a budete důsledně používat přístroj, můžete dosáhnout požadovaných výsledků. Výrazně selepší pleť a tvary těla.

Mohu při napínání a vytahování kůže použít obě ruce?

Odborníci na péči o pleť vždy raději používají jednu ruku k napínání a vytahování kůže a druhou k ovládnutí ultrazvukového generátoru. Zkuste postupovat stejně.